

inspector®

AT1150

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АЛКОТЕСТЕР



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- Электрохимический профессиональный сенсор класса Hi-End
- Монохромный OLED-дисплей со светодиодным индикатором
- 4 режима измерения, включая бесконтактный
- Для индивидуального и корпоративного использования
- Диапазон измерений: 0.00~2.50 мг/л
- Точность показаний: ± 0.025 мг/л
- Память на 12000 результатов тестов
- Дата и время проведения каждого теста
- Счетчик количества тестов
- Поддержка мобильного приложения
- Пригоден для измерений при температуре до $+50^{\circ}\text{C}$
- Регулировка объема выдоха (при проблемах с лёгкими)
- Хранение в памяти максимального значения измерений («рекорда»)

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием!

Внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

- Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией в полном объеме.
- Рекомендуется проводить калибровку сенсора устройства каждые 12 месяцев или после каждых 1000 тестов. Использовать устройство без калибровки можно, но показания устройства могут быть неточными.
- Тестирование должно проводиться не ранее чем через 30 минут после приема пищи, алкоголя или курения. Более раннее тестирование может привести к некорректным результатам.
- Остатки алкоголя во рту могут исказить результат измерения.
- Не погружайте устройство в воду, не промывайте его водой.
- Напитки с сильным ароматом или ополаскиватели рта, содержащие алкоголь, могут привести к искажениям результата измерения. Подождите 30 минут или тщательно ополосните ротовую полость чистой водой.
- Попадание сигаретного дыма в алкотестер может привести к выходу из строя сенсора.
- Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения, даже небольшой уровень опьянения скажется на манере вождения и приведет к аварии.
- Не используйте устройство для определения допустимой дозы алкоголя при вождении автомобиля. Производитель и Продавец не несут никакой ответственности за возможные последствия.
- Если планируете не использовать устройство в течение долгого времени, то храните устройство без установленных батареек. При первом тестировании после длительного хранения показания измерений могут быть некорректными – обязательно произведите повторное измерение.
- Замените батарейки, когда на экране возникнет предупреждение о низком заряде батарей, для сохранения точности измерений.
- В случае, если результат измерения превысил значение 0.50 мг/л, для повторного измерения потребуется больше времени для подготовки сенсора, чем обычно.
- Для получения наиболее точных результатов измерения проводите тестирование при рекомендованной температуре использования: от -5 до +50 °C.
- Избегайте слишком сильного выдоха, так как при этом на сенсор может попасть слюна и это может привести к поломке сенсора.
- Не храните устройство в местах с повышенной температурой и влажностью. Хранение рекомендуется при комнатной температуре.
- Не вдыхайте воздух во время тестирования.

Об устройстве


Благодарим Вас за приобретение профессионального алкотестера **INSPECTOR AT1150** с высокой точностью измерений. Устройство предназначено для индивидуального и корпоративного использования. Устройство производит измерение уровня алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи электрохимического профессионального сенсора класса Hi-End, который предоставляет результаты измерений с наивысшей точностью при соблюдении условий эксплуатации.

Комплектация


- Алкотестер
- Две батарейки AA
- 20 индивидуальных мундштуков
- 3 бесконтактных мундштука
- Чехол для переноски
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон

Вид устройства

1 – Индивидуальный мундштук / 2 – Бесконтактный мундштук / 3 – Отверстие для мундштука / 4 – Светодиодный индикатор / 5 – Экран / 6 – Кнопка питания (O) / 7 – Кнопка Меню (M) / 8 – Батарейный отсек

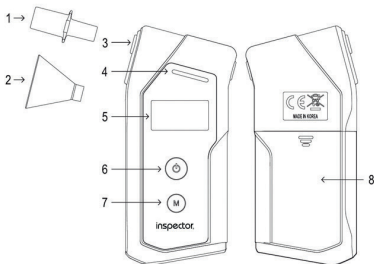

Подготовка к работе

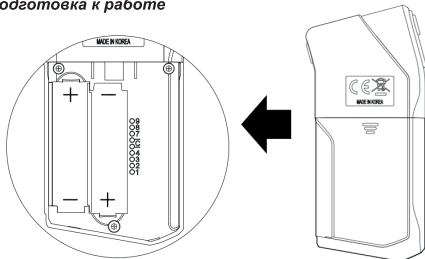

- 1) Установите две батарейки АА в батарейный отсек, соблюдая полярность;
- 2) Установите мундштук в соответствующее отверстие алкотестера;
- 3) Проверьте, чтобы мундштук был плотно установлен в отверстие;
- 4) Индивидуальные мундштуки предназначены для персонального использования, а бесконтактные – для группового тестирования (чек-апа).

Режимы измерений

Данная модель имеет 4 режима измерения:

Персональные режимы			Бесконтактный режим
			
СТАНДАРТ	ЭКСПЕРТ	ПРО	БЕЗ ВЫДОХА

Режимы **СТАНДАРТ** / **ЭКСПЕРТ** / **ПРО** относятся к персональному тестированию с использованием индивидуальных мундштуков, а режим **БЕЗ ВЫДОХА** предназначен для быстрых бесконтактных проверок групп людей.

Рассмотрим доступные режимы измерения подробнее:

Режимы	Описание
 СТАНДАРТ	- Стандартный режим тестирования, используемый в моделях алкотестеров INSPECTOR - В данном режиме измеряется количество алкоголя в крови через дыхание человека - Объем выдыхаемого воздуха можно настроить в пункте меню “ОБЪЕМ ВЫДОХА” в диапазоне от 0.8 л до 1.8 л
 ЭКСПЕРТ	- Экспертный режим проверки выдоха, дополнительно проверяет еще и остатки алкоголя в полости рта, который может влиять на реальные показатели степени опьянения при проверке - В режиме ЭКСПЕРТ осуществляется проверка аналогичная режиму СТАНДАРТ, дополняемая результатами доп. проверки полости рта в виде сообщений: «Обнаружен алкоголь во рту» / «Возможен алкоголь во рту» / «Во рту алкоголя нет» - Сообщения «Обнаружен алкоголь во рту» и «Возможен алкоголь во рту» указывают на то, что полученные результаты измерения количества алкоголя в крови через дыхание могут быть некорректными и на них могли повлиять остатки алкоголя в полости рта! - Режим ЭКСПЕРТ также позволяет выявить ложные результаты теста, если алкоголь не употреблялся, а режим СТАНДАРТ показал его наличие. Именно режим ЭКСПЕРТ проверит происхождение таких результатов, например, после только что съеденной конфеты с алкоголем. ВАЖНО: Данный режим измерения рекомендуется использовать при температуре не менее 15°C и выше.
 ПРО	- Режим тестирования самой глубокой части выдоха по сравнению с режимом СТАНДАРТ. В глубине легких человека концентрация паров алкоголя наиболее стабильна, поэтому результат тестирования будет максимально точным. ВАЖНО: Не останавливайте и не прерывайте выдох во время тестирования, продолжайте дуть до полного окончания воздуха при выдохе!

Режимы	Описание
 БЕЗ ВЫДОХА	• Бесконтактный режим проверки на наличие алкоголя • Предназначен для быстрой проверки большого количества людей • Нет требований по объему или продолжительности выдоха • В этом режиме не демонстрируются результаты измерения в виде мг/л или промилле. Идет измерение превышен или не превышен установленный уровень допустимого алкоголя согласно настройке «ПОРОГ ОПОВЕЩЕНИЯ» • ВАЖНО: перед началом использования этого режима убедитесь, что алкотестер показывает нули в других режимах использования во избежание некорректных результатов от остаточных следов алкоголя предыдущих тестирований


Проведение измерений

Шаг 1. Для включения устройства нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку питания (⏻). На экране будут отображены текущие дата и время, а также информация о сроке следующей рекомендованной калибровки:

- ДАТА / ВРЕМЯ
 02-07-25 18:06
 - СЛЕД. КАЛИБРОВКА
 365 ДНЕЙ

Примечание: Если не производить никаких действий в течение 3 минут - произойдет автоматическое выключение устройства

Шаг 2. Автоматически начнется процесс прогрева сенсора, необходимый перед началом измерения:

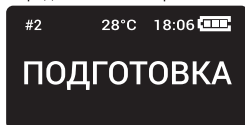

Доп. символы на экране во время прогрева сенсора и готовности к проведению теста:



- 1) Количество проведенных тестов
- 2) Температура окружающей среды
- 3) Текущее время
- 4) Уровень заряда элементов питания

Шаг 3. Когда прогрев сенсора будет завершен, прозвучит двойной звуковой (бип) сигнал, на экране появится название режима измерения и надпись "ДУЙТЕ":



**Режим
СТАНДАРТ**

**Режим
ЭКСПЕРТ**

**Режим
ПРО**

**Режим
БЕЗ ВЫДОХА**

При каждом включении устройство будет оставаться в том режиме измерения, который использовался последним до выключения устройства.

Переключаться между режимами измерения можно с помощью короткого нажатия кнопки питания (⏻).

Режим БЕЗ ВЫДОХА позволяет производить тестирование вручную нажатием на кнопку Меню (M) вне зависимости от выдоха.

Шаг 4. Произведите глубокий вдох, а затем выдох в мундштук, крепко обхватив его губами до двойного звукового сигнала (кроме бесконтактного режима измерения). Длительность и интенсивность необходимого выдоха регулируется устройством автоматически в зависимости от выбранного режима измерения:


**ПРОДОЛЖАЙТЕ
ВЫДОХ**

Шаг 5. Если выдох произведен успешно, автоматически начнется анализ на наличие алкоголя, в это время на экране будет надпись "АНАЛИЗ ВЫДОХА":

**АНАЛИЗ
ВЫДОХА**

Шаг 6. Результат измерения будет продемонстрирован на экране в течение 4 секунд, кнопки питания и меню будут временно заблокированы.


Над результатом измерения на экране будет отображена следующая информация:

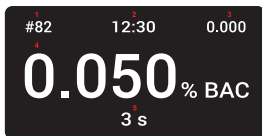


Над результатом измерения на экране будет отображена следующая информация:

1. Последовательный номер произведенного теста;
2. Время проведения теста;
3. Результат предыдущего теста;
4. Текущий результат проверки;
5. Обратный отсчет времени демонстрации результата проверки.

Персональные режимы с использованием индивидуальных мундштуков СТАНДАРТ / ЭКСПЕРТ / ПРО:

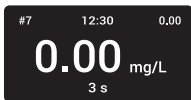


Режим
СТАНДАРТ / ПРО

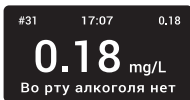


Режим
ЭКСПЕРТ


В режиме ЭКСПЕРТ результаты измерения будут дополнены информацией о наличии алкоголя в полости рта:

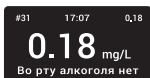

В полости рта алкоголя
не обнаружено

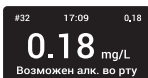


В полости рта возможен
остаточный алкоголь

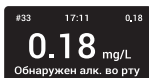

В полости рта
обнаружен алкоголь

В бесконтактном режиме БЕЗ ВЫДОХА возможны только два результата измерений: **ОК** или **ВНИМАНИЕ**:

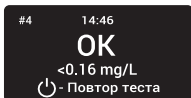

ОК - если результат измерения ниже значения настройки «Порог оповещения» (0,16 мг/л по умолчанию)


ВНИМАНИЕ - если результат измерения выше значения настройки «Порог оповещения» (0,16 мг/л по умолчанию)

Светодиодный индикатор во всех режимах измерения:

Встроенный светодиодный индикатор мигает красным светом в случае превышения результатом измерения установленного значения в настройке «Порог оповещения» (0,16 мг/л по умолчанию).

А зеленым светом – если результат измерения не превысил установленного значения в настройке «Порог оповещения» (0,16 мг/л по умолчанию).

Шаг 7. После ознакомления с результатом можно выполнить следующие действия:

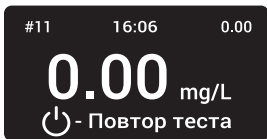

- 1) Повтор теста - для этого коротко нажмите кнопку питания (⏻);
- 2) Выключение устройства - для этого нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку питания (⏻).

Примечание: Устройство выключится автоматически по истечении 3 минут, если не будет произведено никаких действий.

Индикация на экране и возможные неисправности

ВАЖНО: НЕОБХОДИМО ПОДОЖДАТЬ НЕ МЕНЕЕ 20-30 МИНУТ после приема пищи, алкоголя или курения перед началом тестирования во избежание выхода из строя сенсора или некорректных результатов измерения!

Не забывайте, что у устройства существует допустимая погрешность измерения, таким образом нулевые показания устройства не гарантируют полного отсутствия алкоголя в крови!

ИНДИКАЦИЯ	ЗНАЧЕНИЕ	ДЕЙСТВИЯ
БАТАРЕИ РАЗРЯЖЕНЫ Произведите замену	Низкий заряд батарей. Тест не может быть проведен ввиду низкого заряда батарей.	Замените обе батарейки на новые, соблюдая полярность. Используйте только щелочные элементы питания.
КОРОТКИЙ ВЫДОХ. Дуйте до сигнала!	Объем выдоха недостаточен для проведения измерения.	Нажмите на кнопку питания (⏻) для проведения повторного теста.
СИЛЬНЫЙ ВЫДОХ Дуйте спокойнее!	Выдох произведен слишком сильно для проведения измерения.	Нажмите на кнопку питания (⏻) для проведения повторного теста.

ИНДИКАЦИЯ	ЗНАЧЕНИЕ	ДЕЙСТВИЯ
НАРУШЕНИЕ ТЕМПЕРА- ТУРНОГО ДИАПАЗОНА	Тест не может быть проведен ввиду отклонения температуры окружающей среды от допустимых значений: $-5+50^{\circ}\text{C}$	Повторите тест при допустимых значениях температуры окружающей среды ($-5+50^{\circ}\text{C}$).
ОБНАРУЖЕНА СЛЮНА. Повторите тест через 20 мин.	Во время выдоха на сенсор попала слюна.	Подождите 20-30 минут и попробуйте снова. Если ошибка появится повторно – обратитесь в сервис-центр INSPECTOR.
ПРЕВЫШЕНО КОЛ-ВО ТЕСТОВ. Обратитесь в сервисный центр	Достигнут лимит количества тестов до калибровки, установленного в меню настроек.*	Обратитесь в сервисный центр INSPECTOR для калибровки.
ТРЕБУЕТСЯ КАЛИБРОВКА. Обратитесь в сервисный центр	Превышен временной интервал калибровки, установленного в меню настроек.**	Обратитесь в сервисный центр INSPECTOR для калибровки.
ОТСУТСТВУЕТ КАЛИБРОВКА. Обратитесь в сервисный центр	В устройстве отсутствует информация о проведенной калибровке.	Обратитесь в сервисный центр INSPECTOR для калибровки.

* Рекомендуется проводить калибровку каждые 1000 тестов для сохранения высокой точности измерений

** Рекомендуется проводить калибровку каждые 12-24 мес. для сохранения высокой точности измерений

Меню настроек

Вход в меню настроек осуществляется продолжительным нажатием кнопки меню (M) во время предварительного прогрева сенсора.

Навигация по меню осуществляется следующим образом:

- Короткое нажатие на кнопку питания (⏻) - перемещение вверх / выбор вариантов настройки;
- Короткое нажатие на кнопку меню (M) - перемещение вниз/ выбор вариантов настройки;
- Продолжительное нажатие на кнопку питания (⏻) - вход в настройку;
- Продолжительное нажатие на кнопку меню (M) - выход из настройки (без сохранения изменений);

Процедура сохранения настроек зависит от пункта меню:

A) В большинстве пунктов меню для сохранения настройки достаточно нажать и удерживать 1 сек. кнопку питания (⏻).

Б) В некоторых пунктах меню (ВРЕМЯ/ДАТА, ПИН-КОД, СЕРВИС МЕНЮ) нужно нажать и удерживать 1 сек. кнопку меню (M) до появления сообщения «СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ? ДА/НЕТ».

Выберите «ДА», затем нажмите и удерживайте 1 сек. кнопку питания (P) для сохранения изменений настройки.

Выберите «НЕТ», затем нажмите и удерживайте 1 сек. кнопку питания (P) для отклонения изменений настройки.

1. Результаты персональных измерений (тестов)




Отображение результатов проведенных измерений в персональных режимах СТАНДАРТ/ЭКСПЕРТ/ПРО с информацией о дате и времени, номере и результате тестов. Самый недавний результат измерения демонстрируется первым. Общее количество результатов персональных тестов в памяти устройства – до 2.000 записей.

- Для просмотра предыдущего результата нажмите на кнопку питания (P);

- Для просмотра последующего результата нажмите на кнопку меню (M);

- Для возврата в меню продолжительно нажмите на кнопку меню (M).

2. Результаты бесконтактной проверки (чек-апа)

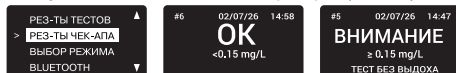



Отображение результатов проведенных измерений в бесконтактном режиме БЕЗ ВЫДОХА с информацией о дате и времени, номере и результате тестов. Самый недавний результат измерения демонстрируется первым. Общее количество результатов бесконтактных тестов в памяти устройства – до 10.000 записей.

- Для просмотра предыдущего результата нажмите на кнопку питания (P);

- Для просмотра последующего результата нажмите на кнопку меню (M);

- Для возврата в меню продолжительно нажмите на кнопку меню (M).

3. Выбор режима

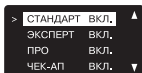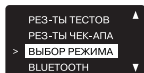

Выберите режимы, которые будут использоваться в устройстве. Лишние режимы можно деактивировать - они будут скрыты из выбора режима перед началом тестирования.


-Перемещение вверх/вниз осуществляется короткими нажатиями на кнопки (⏻)/(M);

- Выбор настройки осуществляется продолжительным нажатием кнопки (⏻);

- Для сохранения настройки продолжительно нажмите на кнопку меню (M), затем выберите «ДА» и подтвердите продолжительным нажатием кнопки (⏻);

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключить все режимы нельзя, устройство не позволит сохранить такую настройку.

4. Bluetooth

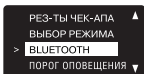

Модель **AT1150** поддерживает соединение со смартфоном по Bluetooth 5.0. Для использования этой функции понадобится установить мобильное приложение «ALCOFIND (UNIVERSAL)» из магазинов приложений GooglePlay или iOSAppStore. Приложение разработано для использования только на смартфонах, не подходит для использования на планшетах или других совместимых устройствах.

Минимальные требования к ОС на смартфоне: iOS 9.0 и выше / Android 7.0 и выше.



Варианты настройки: ВКЛ./ВЫКЛ.

- Для выбора вариантов настройки нажмите на кнопку питания (⏻) или кнопку меню (M);

- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку питания (⏻);

- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (M).

5. Порог оповещения

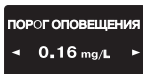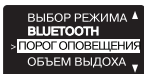


Значение порога оповещения может быть выставлено пользователем вручную, а также выключено.

Значение по умолчанию: **0,16 мг/л** (согласно законодательству РФ по состоянию на 2026 г.)

- Для увеличения значения порога оповещения нажмите на кнопку питания (⏻);
- Для уменьшения значения порога оповещения нажмите на кнопку меню (Ⓜ);
- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку питания (⏻);
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (Ⓜ).

6. Объем выдоха

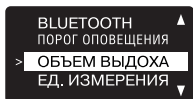


Установка объема выдоха для людей, у которых есть проблемы с лёгкими. Устанавливается для использования в персональных режимах СТАНДАРТ/ЭКСПЕРТ/ПРО.

Диапазон настройки: от 0,8 л до 1,8 л с шагом в 0,1 л.

Значение по умолчанию – 1,2 л.

- Для увеличения объема нажмите на кнопку питания (⏻);
- Для уменьшения объема нажмите на кнопку меню (Ⓜ);
- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку питания (⏻);
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (Ⓜ).

7. Единицы измерения

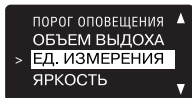



Выбор единиц измерения результатов тестов.

Варианты настройки: **мг/л, промилле (‰), мг/100мл, % ВАС, мкг/л и т.д.**

Значение по умолчанию: **мг/л** (согласно законодательству РФ по состоянию на 2026 г.)

- Для изменения вариантов настройки используйте короткие нажатия на кнопки меню (**М**) или питания (**⏻**);
- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку питания (**⏻**);
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (**М**).

8. Яркость

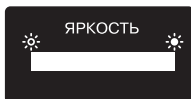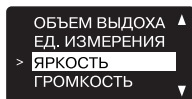


Настройка яркости экрана устройства.

Варианты настройки: доступно 5 уровней яркости экрана, переключаемых «ползунком» на экране

- Короткое нажатие на кнопку питания (**⏻**) – увеличивает яркость экрана;
- Короткое нажатие на кнопку меню (**М**) - уменьшает яркость экрана;
- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку питания (**⏻**);
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (**М**).

9. Громкость


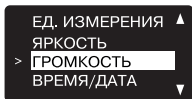


Настройка уровня громкости устройства.

Варианты настройки: доступно 6 уровней громкости, переключаемых «ползунком» на экране

- Короткое нажатие на кнопку питания (⏻) – увеличивает громкость;
- Короткое нажатие на кнопку меню (M) - уменьшает громкость;
- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку питания (⏻);
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (M).

10. Время/Дата

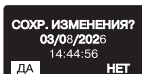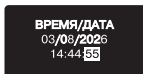

Установка текущей даты и времени.

- Продолжительное нажатие на кнопку питания (⏻) - выбор элемента для изменения;
- Короткое нажатие на кнопку питания (⏻) - выбор значения в сторону увеличения;
- Короткое нажатие на кнопку меню (M) -выбор значения в сторону уменьшения;
- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек. кнопку меню (M) до появления сообщения «СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ? ДА/НЕТ».
- Выберите «ДА», затем нажмите и удерживайте 1 сек. кнопку питания (⏻) для сохранения изменений настройки.
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (M).

11. Язык



Выбор языка меню настроек.

Варианты настройки: **Английский / Русский (по умолчанию)**

- Для выбора вариантов настройки нажмите на кнопку питания (⏻) или кнопку меню (M);
- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку питания (⏻);
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (M).

12. Сервис меню



Вход в меню служебных настроек. Для доступа к ним необходимо ввести код доступа (**по умолчанию: 0000**), в дальнейшем его можно сменить на любое четырехзначное число в настройке "ПИН-КОД".

- Продолжительное нажатие на кнопку питания (⏻) - выбор элемента кода доступа для изменения;
- Короткое нажатие на кнопку питания (⏻) - выбор значения в сторону увеличения;
- Короткое нажатие на кнопку меню (M) - выбор значения в сторону уменьшения;
- Для входа в сервис меню после ввода кода доступа: установите курсор на последнюю (четвертую) кода доступа, затем нажмите и удерживайте 1 сек. кнопку питания (⏻). Выберите «ДА», затем нажмите и удерживайте 1 сек. кнопку питания (⏻) для подтверждения входа в сервис меню;
- Если код доступа был введен неправильно, то ничего не произойдет до момента ввода корректного кода доступа;
- Для возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (M).

12.1 Сервис меню: Количество тестов



Установка максимального количества тестов, допустимых до проведения процедуры калибровки.

Варианты настройки: **100-2000 тестов/ Выкл.** (без ограничения)

Значение по умолчанию: **1000 тестов**

- Короткое нажатие на кнопку питания (⏻) - выбор значения в сторону увеличения;
- Короткое нажатие на кнопку меню (M) - выбор значения в сторону уменьшения;
- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку питания (⏻);
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (M).

12.2 Сервис меню: Срок калибровки




Установка максимального срока использования до проведения процедуры калибровки.

Варианты настройки: **1-24 мес.**

Значение по умолчанию: **24 мес.**

- Короткое нажатие на кнопку питания (⏻) - выбор значения в сторону увеличения;
- Короткое нажатие на кнопку меню (M) - выбор значения в сторону уменьшения;
- Для сохранения настройки и возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку питания (⏻);
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (M).

12.3 Сервис меню: ПИН-КОД

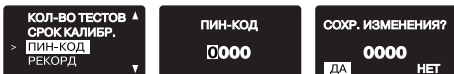

Смена кода доступа в сервис меню.

Варианты настройки: **0000-9999**

Значение по умолчанию: **0000**

- Продолжительное нажатие на кнопку питания (⏻) - выбор элемента для изменения;
- Короткое нажатие на кнопку питания (⏻) - выбор значения в сторону увеличения;
- Короткое нажатие на кнопку меню (M) - выбор значения в сторону уменьшения;
- Для сохранения изменений и выхода в меню после ввода нового кода доступа: установите курсор на последнюю (четвертую) цифру кода доступа, затем нажмите и удерживайте 1 сек. кнопку питания (⏻). Выберите «ДА», затем нажмите и удерживайте 1 сек. кнопку питания (⏻) для подтверждения;
- Для возврата в меню без сохранения изменений нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (M).

12.4.Сервис меню: РЕКОРД



В этом пункте будет храниться максимальный результат измерений, произведенных до следующей калибровки устройства, т.е. своеобразный «рекорд» за это время. Хранению подлежат результаты измерений персональных режимов СТАНДАРТ / ЭКСПЕРТ / ПРО, включая значение измерения, дату и время теста.

13. Информация



Отображение версии программного обеспечения устройства, даты и времени последней калибровки устройства и количества проведенных тестов персональных/бесконтактных.

- Для возврата в меню нажмите и удерживайте 1 сек кнопку меню (M).

Технические характеристики

Диапазон измерений	0.00 ~ 2.50 мг/л 0.00 ~ 5.00 ‰ 0.000 ~ 0.500 %BAC
Точность показаний	±0.025 мг/л ±0.05 ‰ ±0.005 %BAC
Режимы измерения	Стандарт, Эксперт, Про, Бесконтактный
Тип применения	Индивидуальный / Корпоративный
Дисплей	Монохромный OLED со светодиодом
Сенсор	Электрохимический класса Hi-End
Готовность к тесту	до 5 сек.
Память	до 12.000 показаний с датой и временем + «рекорд»
Беспровод. интерфейс	Bluetooth 5.0
Моб.приложение	Alcofind Universal
Элементы питания	2 x 1.5V "AA" алкалиновые
Кол-во тестов на одном комплекте батарей	Около 1500 тестов
Размеры (ШхВхГ)	60мм x 128мм x 24мм
Вес	130г (с батарейками)
Калибровка	12 - 24 мес. / 1000 тестов
Рабочая температура	-5 ~ 50°C

ВНИМАНИЕ: Технические характеристики, функционал и комплектация устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантия

Срок гарантии на данное устройство – 12 месяцев.
Срок службы – 3 года.

Данное устройство может быть принято в гарантийный ремонт только при наличии фирменного гарантийного талона INSPECTOR. Гарантийный талон должен обязательно содержать серийный номер устройства, дату продажи и печать продавца.

Устройство не подлежит бесплатному сервисному обслуживанию в случае, если:

- ! Утерян или неправильно заполнен гарантийный талон, не указана дата продажи, отсутствует печать продавца;
- ! Были нарушены правила эксплуатации устройства;
- ! Устройство подвергалось механическим повреждениям, в результате перегрева (огня), аварии, при наличии коррозии элементов в результате воздействия влаги (воды) или агрессивных жидкостей, использования не по прямому назначению, небрежного обращения, неквалифицированных попыток вскрытия или ремонта;
- ! Были использованы неоригинальные аксессуары.

Адрес сервисного центра INSPECTOR:

142171, МО, г. Щербинка, ул. Южная, д.8

Тел.: +7 (495) 504-2747

E-mail: support@rd-inspector.ru

WEB: www.rd-inspector.ru



@RD_INSPECTOR_RU

